


# Kimberly-Clark\*

## MIC-KEY\* medikamentsæt med Secur-Lok\* studs

### MIC-KEY\* MEDIKAMENTSÆT MED 90° SEKUR-LOK\* VINKELSTUDS OG PORT-T

#### BRUGSANVISNING

1. Tag proppen af MIC-KEY\* ernæringssonden, så der er fri til kontraventilen i MIC\* ernæringssonden.
2. Medikamentsættet smækkes på plads ved at rette de sorte streger på medikamentsæt og MIC-KEY\* ernæringssonde ind med hinanden. Lås det på plads ved at dreje det 3/4 omgang HØJRE OM.
3. Gennemskyl medikamentsæt og MIC-KEY\* sonde med 1-2 ml varmt vand. Kontrollér, at skylning går let før indgivelse af medicin.
4. Efter indgivelse af medicin gennemskylles medikamentsæt og MIC-KEY\* sonde med 1-2 ml varmt vand.
5. Medikamentsættet løsnes på MIC-KEY\* sonden ved at dreje sættet VENSTRE OM, så de sorte streger på medikamentsæt og MIC-KEY\* sonde retter ind med hinanden. Medikamentsættet trækkes forsigtigt af MIC-KEY\* sonden. Sæt proppen i MIC-KEY\* sonden igen.
6. Efter brug vaskes medikamentsættet med varmt sæbevand og skylles omhyggeligt.

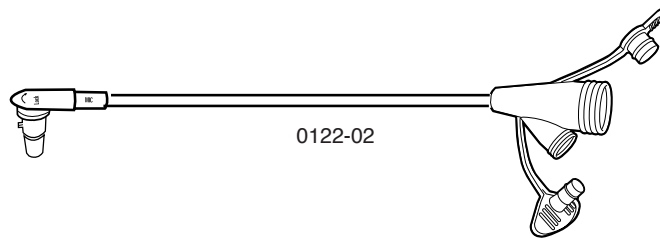

UDELUKKENDE TIL BRUG TIL EN ENKELT PATIENT.

ADVARSEL: UDELUKKENDE TIL ENTERAL ERNÆRING OG/ELLER MEDICIN.



Usteril

Antal



Partnummer

REF

Genbestillingsnummer



Engangsbrug



Læs anvisningerne

Receptpligtig (USA)



Anvendes inden



Indeholder ikke DEHP  
(di(2-ethylhexyl)phthalat)



\* Registreret varemærke eller varemærke, der tilhører Kimberly-Clark Worldwide, Inc. eller dets datterselskaber.  
© 2003 KCWW. Alle rettigheder forbeholdes.

Producent: Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 USA  
Distributør i USA: Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA. 30076 USA  
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, Belgium  
<http://www.kchealthcare.com> | USA: tlf. 1 800 528 5591; i andre lande: tlf. +1 801 572 6800