


Kimberly-Clark*

MIC-KEY*-medicatieset met Secur-Lok*-verbindingsstuk

MIC-KEY*-MEDICATIESET MET SECUR-LOK*-HAAKS VERBINDINGSSTUK EN 2-POORTS "Y"

GEbruikSAANWIJZING

1. Verwijder de plug uit de MIC-KEY*-voedingssonde, zodat de antirefluxklep van de MIC*-voedingssonde zichtbaar wordt.
2. Klik de medicatieset op zijn plaats door de zwarte lijn op de medicatieset op een lijn te brengen met de zwarte lijn op de MIC-KEY*. Zet hem vast door hem een driekwartslag RECHTSOM te draaien.
3. Spoel de medicatieset en de MIC-KEY* door met 1 tot 2 ml warm water. Controleer of alles gemakkelijk door te spoelen is voordat u medicatie toedient.
4. Na het toedienen van medicatie spoelt u de medicatieset en de MIC-KEY* door met 1 tot 2 ml warm water.
5. Om de medicatieset los te maken van de MIC-KEY*, draait u de medicatieset LINKSOM totdat de zwarte lijn op de medicatieset op één lijn ligt met die op de MIC-KEY*. Verwijder de medicatieset voorzichtig van de MIC-KEY*. Zet de plug terug in de MIC-KEY*.
6. Na elk gebruik wast u de medicatieset af met warm zeepsop, waarna u deze grondig afspoelt.

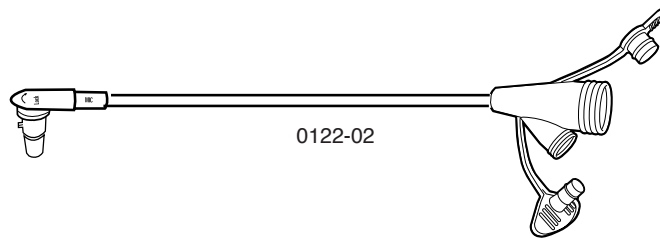

UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BIJ ÉÉN PATIËNT.

WAARSCHUWING: UITSLUITEND VOOR ENTERALE VOEDING EN/OF MEDICATIE.



Niet-steriel

Hoeveelheid

LOT

Partijnummer

REF

Bestelnummer



Voor eenmalig
gebruik



Lees de instructies

Uitsluitend op voorschrift
verkrijgbaar (VS)



Uiterste gebruiksdatum



DEHP (Di(2-ethylhexyl)
ftalaat)-vrije formulering

CE 0344

* Gedeponerd handelsmerk of handelsmerk van Kimberly-Clark Worldwide, Inc. of gelieerde ondernemingen.
© 2003 KCWW. Alle rechten voorbehouden.

Vervaardigd door Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 VS
Gedistribueerd in de VS door Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA. 30076 VS
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, België
<http://www.kchealthcare.com> Bel in de VS 1-800-528-5591; telefoonnummer buiten de VS + 1 801 572 6800