


Kimberly-Clark*

MIC-KEY* Medikationsset mit Secur-Lok* Anschluss

MIC-KEY* MEDIKATIONSSET MIT RECHTWINKLIGEM SECUR-LOK* ANSCHLUSS UND 2 PORT "Y"-ADAPTER

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Den Verschlusspfropfen aus dem MIC-KEY* Versorgungsschlauch entfernen, um das Antirückflussventil des MIC* Schlauchs freizulegen.
2. Das Medikationsset aufsetzen. Dazu die schwarze Linie am Medikationsset auf die schwarze Linie des MIC-KEY* ausrichten. Mit einer 3/4-Drehung IM UHRZEIGERSINN fixieren.
3. Das Medikationsset und den MIC-KEY* mit 1 ml bis 2 ml warmem Wasser spülen. Vor dem Verabreichen von Medikamenten auf Durchgängigkeit prüfen.
4. Nach der Medikation das Medikationsset und den MIC-KEY* mit 1 ml bis 2 ml warmem Wasser spülen.
5. Zum Lösen des Medikationssets vom MIC-KEY* das Medikationsset GEGEN DEN UHRZEIGERSINN drehen, bis die schwarzen Linien auf dem Medikationsset und dem MIC-KEY* bündig sind. Das Medikationsset vorsichtig vom MIC-KEY* lösen. Den Pfropfen wieder in den MIC-KEY* einsetzen.
6. Das Medikationsset nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und Seife waschen und gründlich nachspülen.

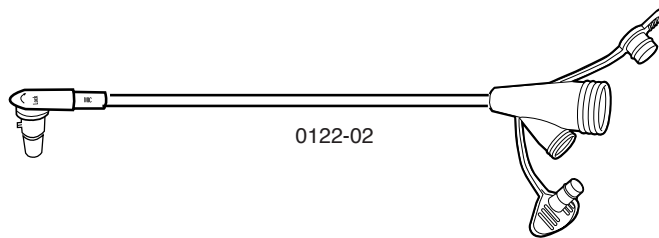

NUR FÜR EINEN PATIENTEN.

ACHTUNG: NUR ZUR ENTERALEN ERNÄHRUNG UND/ODER MEDIKATION



Unsteril

Stückzahl

LOT

Chargennummer

REF

Bestellnummer



Einmalprodukt



Anweisungen
lesen

Verschreibungs-
pflichtig (USA)



Verwendbar bis



DEHP (Di(2-ethylhexyl)
Phthalat)-freie Formel

CE 0344

* Eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen von Kimberly-Clark Worldwide, Inc. oder der Tochterunternehmen. © 2003 KCWW. Alle Rechte vorbehalten.

Hergestellt von Ballard Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 USA
In den USA vertrieben durch Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA. 30076 USA
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, Belgien
<http://www.khealthcare.com> Anrufe innerhalb der USA unter 1 800 528 5591;
internationale Anrufe unter +1 801 572 6800