


# Kimberly-Clark\*

## MIC-KEY\*-verlengset met Secur-Lok\*-verbindingsstuk

### MIC-KEY\*-VERLENGSET MET SECUR-LOK\*-HAAKS VERBINDINGSSTUK EN 2-POORTS "Y" EN KLEM

#### GEbruiksaanwijzing

1. Verwijder de plug uit de MIC-KEY\*-voedingssonde, zodat de antirefluxklep van de MIC\*-voedingssonde zichtbaar wordt.
2. Sluit de verlengset aan door de zwarte lijn op het verbindingsstuk op een lijn te brengen met de zwarte lijn op de MIC-KEY\*. Zet hem vast door hem een driekwartsslag RECHTSOM te draaien.
3. Spoel de verlengset en de MIC-KEY\* door met warm water (10 ml voor volwassenen, 3–5 ml voor kinderen). Controleer of alles gemakkelijk door te spoelen is.
4. Open de voedingspoort voor het uitvoeren van gastrische decompressie of het toedienen van enterale voeding.
5. Na voeding of decompressie spoelt u de verlengset en de MIC-KEY\* door met 5–10 ml warm water.
6. Om de verlengset los te maken van de MIC-KEY\*, draait u het verbindingsstuk van de verlengset LINKSOM totdat de zwarte lijn op de MIC-KEY\* op één lijn ligt met die op de verlengset. Verwijder het verbindingsstuk voorzichtig van de MIC-KEY\*. Zet de plug terug in de MIC-KEY\*.
7. Na elk gebruik wast u de verlengset af met warm zeepsop, waarna u deze grondig afspoelt.

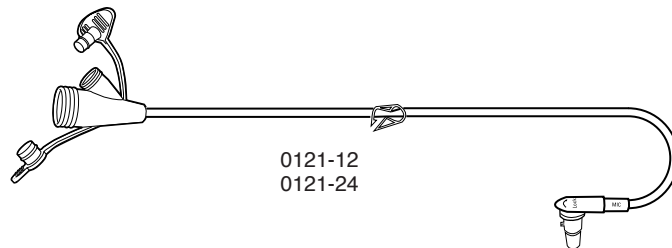

#### UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BIJ ÉÉN PATIËNT.

#### WAARSCHUWING: UITSLUITEND VOOR ENTERALE VOEDING EN/OF MEDICATIE.



Niet-steriel

Hoeveelheid

LOT

Partijnummer

REF

Bestelnummer



Voor eenmalig gebruik



Lees de instructies

Uitsluitend op voorschrift verkrijgbaar (VS)



Uiterste gebruiksdatum



DEHP (Di(2-ethylhexyl)ftalaat)-vrije formulering

CE 0344

\* Gedeponoerd handelsmerk of handelsmerk van Kimberly-Clark Worldwide, Inc. of gelieerde ondernemingen. © 2003 KCWW. Alle rechten voorbehouden.

Vervaardigd door Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 VS  
Gedistribueerd in de VS door Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA. 30076 VS  
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, België  
<http://www.kchealthcare.com> Bel in de VS 1-800-528-5591; telefoonnummer buiten de VS + 1 801 572 6800