


# Kimberly-Clark\*

## MIC-KEY\* Verlängerungsset mit Secur-Lok\* Anschluss

MIC-KEY\* VERLÄNGERUNGSSET MIT RECHTWINKLIGEM SECUR-LOK\* ANSCHLUSS, 2-PORT „Y“-ADAPTER UND KLEMME

### GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Den Verschlusspfropfen aus dem MIC-KEY\* Versorgungsschlauch entfernen, um das Antirückflussventil des MIC\* Schlauchs freizulegen.
2. Das Verlängerungsset anschließen. Dazu die schwarze Linie am Anschlussstück mit der schwarzen Linie der MIC-KEY\* Sonde ausrichten. Mit einer 3/4-Drehung IM UHRZEIGERSINN fixieren.
3. Das Verlängerungsset und die MIC-KEY\* Sonde mit warmem Wasser spülen (10 ml bei Erwachsenen, 3 – 5 ml bei Kindern). Auf Durchgängigkeit prüfen.
4. Den Ernährungsport zur Magendekompression oder zur enteralen Ernährung öffnen.
5. Nach der Nahrungsverabreichung oder Dekompression das Verlängerungsset und die MIC-KEY\* Sonde mit 5 – 10 ml warmem Wasser spülen.
6. Um das Verlängerungsset von der MIC-KEY\* Sonde zu trennen, den Anschluss des Verlängerungssets ENTGEGEN DEM UHRZEIGERSINN drehen, bis die schwarze Linie auf der MIC-KEY\* Sonde mit der schwarzen Linie auf dem Verlängerungsset ausgerichtet ist. Den Anschluss vorsichtig vom MIC-KEY\* lösen. Den Ppropfen wieder in den MIC-KEY\* einsetzen.
7. Das Verlängerungsset nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und Seife waschen und gründlich nachspülen.

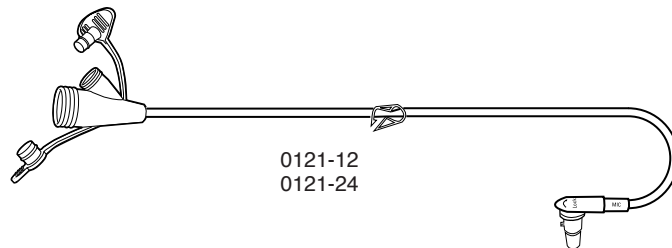

NUR FÜR EINEN PATIENTEN.

ACHTUNG: NUR ZUR ENTERALEN ERNÄHRUNG UND/ODER MEDIKATION.



Unsteril

Stückzahl

LOT

Chargennummer

REF

Bestellnummer



Einmalprodukt



Anweisungen lesen

Verschreibungspflichtig (USA)



Verwendbar bis



DEHP (Di(2-ethylhexyl) Phthalat)-freie Formel

CE 0344

\* Eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen von Kimberly-Clark Worldwide, Inc. oder der Tochterunternehmen. © 2003 KCWW. Alle Rechte vorbehalten.

Hergestellt von Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 USA  
In den USA vertrieben durch Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA. 30076 USA  
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, Belgien  
<http://www.kchealthcare.com> Anrufe innerhalb der USA unter 1 800 528 5591;  
internationale Anrufe unter +1 801 572 6800