


# Kimberly-Clark\*

## MIC-KEY\* forlængersæt med Secur-Lok\* studs

### MIC-KEY\* FORLÆNGERSÆT MED 90° SECUR-LOK\* VINKELSTUDS OG PORT-T OG KLEMME

#### BRUGSANVISNING

1. Tag proppen af MIC-KEY\* ernæringssonden, så der er fri til kontraventilen i MIC\* ernæringssonden.
2. Forlængersættet tilsluttes ved at rette de sorte streger på studs og MIC-KEY\* sonde ind med hinanden. Lås det på plads ved at dreje den 3/4 omgang HØJRE OM.
3. Gennemskyl forlængersæt og MIC-KEY\* sonde med varmt vand (10 ml til voksenversion, 3-5 ml til børneversion). Kontrollér, at skylning går let.
4. Åbn ernæringsporten til ventrikelsug eller enteral ernæring.
5. Efter indgivelse af ernæring eller tømning gennemskylles forlængersæt og MIC-KEY\* sonde med 5-10 ml varmt vand.
6. Forlængersættet løsnes på MIC-KEY\* sonden ved at dreje studsen VENSTRE OM, så den sorte streg på MIC-KEY\* sonde og forlængersæt retter ind med hinanden. Studsen trækkes forsigtigt af MIC-KEY\* sonden. Sæt proppen i MIC-KEY\* igen.
7. Efter brug vaskes forlængersættet med varmt sæbevand og skylles grundigt.

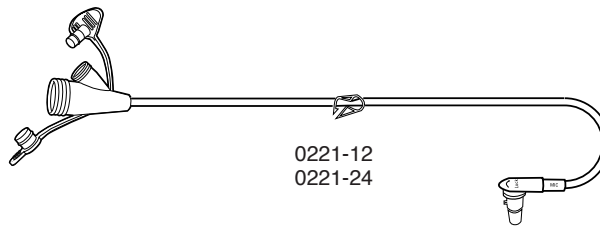

#### UDELUKKENDE TIL BRUG TIL EN ENKELT PATIENT.

#### ADVARSEL: UDELUKKENDE TIL ENTERAL ERNÆRING OG/ELLER MEDICIN.

Indeholder DEHP (se [www.kchealthcare.com/DEHP](http://www.kchealthcare.com/DEHP) for yderligere information)



Usteril

Antal

LOT

Partnummer

REF

Genbestillingsnummer



Engangsbrug



Læs anvisningerne

Receptpligtig (USA)



Anvendes inden



Fremstillingsdato

CE 0344

\* Registreret varemærke eller varemærke, der tilhører Kimberly-Clark Worldwide, Inc. eller dets datterselskaber. © 2003 KCWW. Alle rettigheder forbeholdes.

Producent: Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 USA  
Distributør i USA: Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA. 30076 USA  
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, Belgium  
<http://www.kchealthcare.com> | USA: tlf. 1 800 528 5591; i andre lande: tlf. +1 801 572 6800