


Kimberly-Clark*

MIC-KEY* medikamentsæt med Secur-Lok* studs

MIC-KEY* MEDIKAMENTSÆT MED 90° SEKUR-LOK* VINKELSTUDS OG PORT-T

BRUGSANVISNING

1. Tag proppen af MIC-KEY* ernæringssonden, så der er fri til kontraventilen i MIC* ernæringssonden.
2. Medikamentsættet smækkes på plads ved at rette de sorte streger på medikamentsæt og MIC-KEY* ernæringssonde ind med hinanden. Lås det på plads ved at dreje det 3/4 omgang HØJRE OM.
3. Gennemskyl medikamentsæt og MIC-KEY* sonde med 1-2 ml varmt vand. Kontrollér, at skylning går let før indgivelse af medicin.
4. Efter indgivelse af medicin gennemskylles medikamentsæt og MIC-KEY* sonde med 1-2 ml varmt vand.
5. Medikamentsættet løsnes på MIC-KEY* sonden ved at dreje sættet VENSTRE OM, så de sorte streger på medikamentsæt og MIC-KEY* sonde retter ind med hinanden. Medikamentsættet trækkes forsigtigt af MIC-KEY* sonden. Sæt proppen i MIC-KEY* sonden igen.
6. Efter brug vaskes medikamentsættet med varmt sæbevand og skylles omhyggeligt.

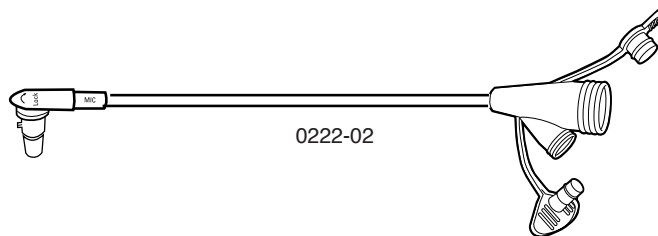

UDELUKKENDE TIL BRUG TIL EN ENKELT PATIENT.

ADVARSEL: UDELUKKENDE TIL ENTERAL ERNÆRING OG/ELLER MEDICIN.

Indeholder DEHP (se www.kchealthcare.com/DEHP for yderligere information)



Usteril

Antal

LOT

Partinummer

REF

Genbestillingsnummer



Engangsbrug



Læs anvisningerne

Receptpligtig (USA)



Anvendes inden



Fremstillingsdato

CE 0344

* Registreret varemærke eller varemærke, der tilhører Kimberly-Clark Worldwide, Inc. eller dets datterselskaber.
© 2003 KCWW. Alle rettigheder forbeholdes.

Producent: Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 USA
Distributør i USA: Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA. 30076 USA
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, Belgium
<http://www.kchealthcare.com> | USA: tlf. 1 800 528 5591; i andre lande: tlf. +1 801 572 6800