


# Kimberly-Clark\*

## MIC-KEY\* Medikationsset mit Secur-Lok\* Anschluss

### MIC-KEY\* MEDIKATIONSSET MIT RECHTWINKLIGEM SECUR-LOK\* ANSCHLUSS UND 2 PORT "Y"-ADAPTER

#### GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Den Verschlusspfropfen aus dem MIC-KEY\* Versorgungsschlauch entfernen, um das Antirückflussventil des MIC\* Schlauchs freizulegen.
2. Das Medikationsset aufsetzen. Dazu die schwarze Linie am Medikationsset auf die schwarze Linie des MIC-KEY\* ausrichten. Mit einer 3/4-Drehung IM UHRZEIGERSINN fixieren.
3. Das Medikationsset und den MIC-KEY\* mit 1 ml bis 2 ml warmem Wasser spülen. Vor dem Verabreichen von Medikamenten auf Durchgängigkeit prüfen.
4. Nach der Medikation das Medikationsset und den MIC-KEY\* mit 1 ml bis 2 ml warmem Wasser spülen.
5. Zum Lösen des Medikationssets vom MIC-KEY\* das Medikationsset GEGEN DEN UHRZEIGERSINN drehen, bis die schwarzen Linien auf dem Medikationsset und dem MIC-KEY\* bündig sind. Das Medikationsset vorsichtig vom MIC-KEY\* lösen. Den Pfropfen wieder in den MIC-KEY\* einsetzen.
6. Das Medikationsset nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und Seife waschen und gründlich nachspülen.

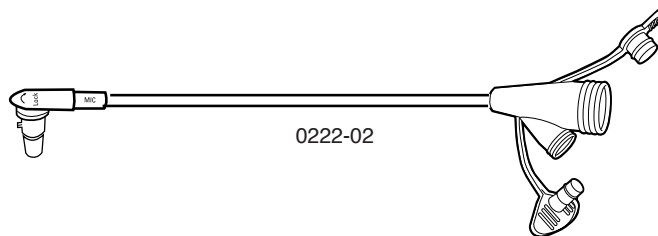

#### NUR FÜR EINEN PATIENTEN.

#### ACHTUNG: NUR ZUR ENTERALEN ERNÄHRUNG UND/ODER MEDIKATION

Enthält DEHP (Einzelheiten unter [www.kchealthcare.com/DEHP](http://www.kchealthcare.com/DEHP))



Unsteril

Stückzahl

LOT

Chargennummer

REF

Bestellnummer



Einmalprodukt



Anweisungen lesen

Verschreibungspflichtig (USA)



Verwendbar bis



Herstellungsdatum

CE 0344

\* Eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen von Kimberly-Clark Worldwide, Inc. oder der Tochterunternehmen. © 2003 KCWW. Alle Rechte vorbehalten.

Hergestellt von Ballard Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 USA  
In den USA vertrieben durch Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA. 30076 USA  
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, Belgien  
<http://www.kchealthcare.com> Anrufe innerhalb der USA unter 1 800 528 5591;  
internationale Anrufe unter +1 801 572 6800